


Piesel Piepser®

Gebrauchsanweisung

Funki

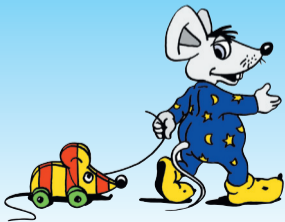

Piesel Piepser
macht mich wach,
wenn ich in das
Bettchen mach !



Diese Gebrauchsanweisung ist vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig zu lesen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung.....	3
Technische Daten	4
10 Tips für das erfolgreiche Training	4-5
Die Tagebücher.....	6
Gerät einschalten / Inbetriebnahme	7
Anbringung	8-9
Technische Daten / Lieferumfang.....	10-11
Mögliche Fehler und deren Beseitigung / Reinigung / Entsorgung	12
Batteriewechsel	13
Sicherheitshinweise	14
EG-Konformitäts-Erklärung.....	15

Sicherheitshinweis: Produkt enthält Kleinteile,
Batterieentsorgung bei Ihrem

Einleitung

Durch die Behandlung des Einnässens (Fachbegriff: Enuresis) mit einem Weckapparat kann in den meisten Fällen eine Lösung des Problems erreicht werden.

Durch das Training soll der nicht vorhandene Reflex des Aufwachens durch den Blasendruck antrainiert werden.



**Nach heutiger Erkenntnis spricht man
bei weniger als zwei nassen Nächten
pro Monat von einem Normalzustand.**



nicht für Kinder unter 3 Jahren zugänglich machen.
örtlichen Umweltberater erfragen.

10 Tips für das erfolgreiche Training:

1. Haben Sie als erstes Geduld.
2. Motivieren Sie Ihr Kind zum Training.
3. Der Weckapparat ist jede Nacht zu benutzen
4. Besprechen Sie die Funktion und üben das Wechseln des Fühlers in aller Ruhe.
5. Probieren Sie, wo das Gerät vom Kind als am wenigsten störend empfunden wird.
6. Lassen Sie das Kind vor dem Schlafengehen noch mal auf die Toilette gehen.
7. In der Anfangsphase wird das Wecksignal oft nicht gehört, wecken Sie das Kind in den ersten paar Tagen. Meist wird das Kind nach wenigen Tagen schon von alleine wach (Behandlungszwischenziel).
8. Das Kind sollte nach einiger Zeit den Alarm selbstständig ausschalten können, helfen Sie ihm bis es soweit ist.
9. Um eine Kontrolle über ständige Nutzung zu haben verwenden Sie und ihr Kind beiliegende Tagebücher.
10. Nach erfolgreicher Behandlung senden Sie bitte das Tagebuch an den Hersteller. Sie erhalten eine kleine Überraschung als Dankeschön.
Die Daten werden für statistische Zwecke benötigt.

Die Tagebücher

Das **Tagebuch** ist von den Eltern zu führen. Pro Tag/Nacht stehen 4 Felder zur Verfügung, hier sollten die jeweiligen Zeiten des Wecksignals eingetragen werden. Zur besseren Kontrolle kann man hier detaillierte Informationen eingeben, nach z.B. folgenden Kriterien:

- N** = nass, komplette Blasenentleerung ins Bett
- BF** = Bett feucht aber nicht nass
- UF** = Unterhose feucht
- T** = Trocken

Das **Tagebüchlein** ist vom Kind zu führen. Bei guter Mitarbeit, d.h. wenn das Kind schnell wach wird (auch mit Hilfe der Eltern), darf sich das Kind ein Aufkleber als Belohnung einkleben. Im weiteren Verlauf, natürlich auch wenn kein Alarm ausgelöst wurde oder wenn die Nacht trocken war: Nach einer nassen Nacht soll es hier nur ein Kreuz oder Strich eintragen.

Gerät einschalten / Inbetriebnahme

Legen Sie die Batterien, wie auf Seite 13 beschrieben, ein.
Vor dem Einschalten den gewünschten Alarm-Modus wählen.
Zum Einschalten ist der Schaltstift aus der Empfangseinheit zu ziehen.
Die Bereitschaft wird durch ein Aufleuchten, 3 Sek., der grünen LED signalisiert.

Pairing

Um das Bluetooth-Pairing erstmalig durchzuführen, müssen Sie die Pause/Pair-Taste 3 mal in sehr kurzer Reihenfolge drücken.
Koppeln Sie während des Pairing -Vorgangs nur 1 Sender und 1 Empfänger; der Empfang mehrerer Einheiten kann den Pairingprozess stören.

Zum Testen eines erfolgreichen Pairings, drücken Sie die Pause/Pair-Taste 2 mal, die LED im Sender blinkt 4 mal als Signal, dass die Geräte verbunden sind.
Beim erneuten Einschalten wird das System automatisch gepairt, dies kann bis zu 30 Sek. dauern. Den Schaltstift während des Pairing nicht verwenden.
Zum Entkoppeln halten Sie die Pause/Pair-Taste 10 Sek. gedrückt.

Anwendung - Alarm

Sobald der Sender feucht wird, blinkt die rote LED 3 mal und sendet innerhalb von 5 Sek. ein Auslösesignal an den Empfänger. Der Sender sendet jede weitere Minute ein Signal an den Empfänger; bis dieser aus der nassen Hose entfernt, gereinigt und getrocknet wird.
Sobald der Alarm einmal ausgelöst wird, blinkt die grüne LED für 2 Minuten und sendet im 30 Sekundentakt ein Signal. Zum vorübergehenden Stummschalten des Alarms (ca. 30 Sekunden) den Pauseknopf drücken.

Der ausgelöste Alarm wird nur durch das Einstecken des Schaltstiftes zurückgesetzt.





Das Gerät verfügt über einen Lautstärkereglern. Überprüfen Sie die Lautstärke bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Hinweis: Geräuschpegel bis zu 100dB bei 30 cm Abstand.

Platzieren Sie den Empfänger niemals in Ohr nähe. Die Lautstärke kann zu Hörverschädigung führen! Die Lautstärke darf nur mit dem mitgelieferten Schraubendreher eingestellt werden.

Anbringung

Wählen Sie den gewünschten Alarm-Modus aus

* nur Piepton * nur Vibration * Vibration + Piepton

Beachten Sie das LED-Signal des Piesel-Piepsen:

Bei Bluetoothunterbrechung blinkt die LED des Empfängers rot-grün.

Sender und Empfänger sind zu weit von einander entfernt.

Die automatische Wiederherstellung der Verbindung kann bis zu 60 Sekunden dauern.



Danach ist der Fühler in der Unterhose zu befestigen (siehe Abbildungen Seite 9).

Hinweis: Zur Vermeidung von direktem Körperkontakt, wird empfohlen, den Fühlervorher in eine handelsübliche Slipseinlage einzuschieben.

Direkter Körperkontakt, kann bei sensibler Haut zu einer Hautirritation führen.



Beim Mädchen
im Bereich
der Scheide.



Beim Jungen
im Bereich der
Penisöffnung.

Technische Daten

Piesel-Piepser-Funki HiMiNr: 15.25.18.0027 PZN: 07232676

Empfänger Maße: 90 x 60 x 30mm (H x B x T) Gewicht: 45 g

Fühler Maße: 55 x 30 x 8mm (H x B x T) Gewicht: 8 g

Batterie: 1 x Lithium CR2032 (3.0V), 3 x AAA (je 1.5V)

Hinweis: Benutzen Sie nur den vom Hersteller empfohlenen Batterietyp.

Lieferumfang

Piesel Piepser-Funki Weckapparat Sender + Empfänger Art.-Nr: 20200

Piesel Piepser-Funki nur Sender Art.-Nr: 20201

Piesel Piepser-Funki nur Empfänger Art.-Nr: 20210

Batteriesatz Art.-Nr: 20203

Ein/Aus Schaltstift (2 Stck) Art.-Nr: 20204

Gebrauchsanweisung Art.-Nr: 20205

Tagebüchlein (Kind) Art.-Nr: 20006

Aufkleberset Art.-Nr: 20007

Tagebuch Eltern Art.-Nr: 20008

Schraubendreher Art.-Nr: -----

Plastikmünze Art.-Nr: -----



Mögliche Fehler und deren Beseitigung

Funktionstest: Indem man den Fühler befeuchtet oder mit einer Büroklammer die Kontaktfläche berührt. Kontrollleuchte blinkt 3 mal (siehe Abbildung S. 13 Abb.2) und es wird ein Auslösesignal gesendet.

Das Gerät gibt keinen Alarmton:

1. Ursache: Fühler ungünstig platziert, wird nicht ausgelöst, trotz erfolgreichem Test.
Abhilfe: Fühler/Slopeinlage anders platzieren.
2. Ursache: Batterie leer.
Abhilfe: Batterie wechseln wie auf Seite 13 beschrieben.
3. Ursache: Wahlschalter steht auf Vibration.
Abhilfe: Wahlschalter auf Alarm stellen.
4. Ursache: Gerät defekt.
Abhilfe: Reparatur durch den Fachhändler oder Hersteller.

Reinigung und Pflege

Entfernen Sie vor der Reinigung immer die Batterie. Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Elektrischer Schock!

Das Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchtem Tuch reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- bzw. Scheuermittel.

Entsorgungshinweis

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig zu entsorgen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen

Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Batterien

Piesal-Piepser-Empfänger:

Gerät mit einer Münze (Abb. 2) öffnen und 1 Batterie (CR-2032) einlegen, dabei die Gummidichtung nicht vergessen!

Batteriespannung zu gering:

Rote Kontrollleuchte leuchtet 1x pro Sekunde.



(Abb.1)

Piesal-Piepsal-Fühler:

Gerät mit einer Münze (Abb. 2) öffnen und 1 Batterie (CR-2032) einlegen, dabei die Gummidichtung nicht vergessen!

Batteriespannung zu gering:

Rote Kontrollleuchte leuchtet jede 5.

Sekunde auf. Nach 5 Minuten blinkt die Kontrollleuchte alle 10 - 20 Sekunden.



(Abb.2)

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden. Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen. Erlauben Sie Kindern ab 6 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur dann eine unbeaufsichtigte Benutzung des Gerätes, wenn diese eine umfangreiche Unterweisung erhalten haben, die ihnen eine gefahrlose Benutzung des Gerätes erlaubt und diese die Gefahren bei unsachgemäßem Benutzung verstehen. Produkt enthält Kleinteile. Elektrische Geräte sind kein Spielzeug! Kinder sollten unter keinen Umständen mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege des Gerätes darf nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, diese werden beaufsichtigt. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.

Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses einführen.

Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen!

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

Batterie-Sicherheitshinweise

Warnung:

Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Es besteht Brand- bzw. Explosionsgefahr!

Batterien unzugänglich für Kinder aufbewahren. Sie sind kein Spielzeug!

Falls eine Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit mit Augen und Haut. Wenn Säure in Ihre Augen gelangt ist, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und einen Arzt auf, falls nötig.

Achtung: Alle Batterien immer gleichzeitig auswechseln und immer den gleichen Batterietyp verwenden.

Keine neuen und alten Batterien mischen!

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und niemals im normalen Hausmüll.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die folgenden Sicherheitshinweise sowie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese Unterlagen auf.

EG-Konformitäts-Erklärung

EG-Konformitäts-Erklärung

im Sinne der EG-Richtlinie Medizinprodukte

93/42/EWG, Anhang VII

Die Bauart des Produktes entspricht der Klasse I

Piesel-Piepsen „Funki“

Das Produkt ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie

Radio Equipment Directive (2014/53/EU), in alleiniger Verantwortung von

Osthoff-Vertretungen, Eintrachtstr. 41, 40699 Erkrath

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

EN 301489, EN 300328, EN 62479, EN 60529

Eine technische Dokumentation mit Risikoanalyse ist vollständig vorhanden.

Die zum Produkt gehörende Gebrauchsanweisung liegt in der Originalfassung vor.

Marlon Osthoff, Erkrath

Garantiebedingungen:

2 Jahre ab Kaufdatum.

Ausgenommen:

Batteriewechsel.

Händlerstempel:

Datum:

Osthoff-Vertretungen · Klinkerweg 4 · 40699 Erkrath
www.piesel-piepsende · Email: info@piesel-piepsende
Telefon +49(0)21 04-94 81 81 · Fax +49(0)21 04-94 81 93

